

LOCATOR®
Абатмент



**Точное
попадание**

LOCATOR® Overdenture Abutment

Ideal for Overdenture Restorations

Самонаводящий

Служит в 28 раз
дольше



Самая низкая высота

Коррекция угла до 40°

LOCATOR® Абатмент

- 1, 2, 3,4, 5 и **6мм** высота
- Однокомпанентный абатмент
- Треугольный захват
- Пластиковая ручная отвертка
- Рекомендуемое усилие 20 Ncm при фиксации





Для чего нужна разная высота?



При неплоском гребне, когда имплантаты были установлены на разном уровне

Пример: 4мм, 2мм, 2мм, & 3мм высота

LOCATOR® Абатмент



Certain

□ Стерильная упаковка абатмента включает:

- Пластиковую отвертку,
- кольцо,
- вставки (белая, розовая and голубая)
- База и вставка (черная)



□ Следует фиксировать при 20Ncm



LOCATOR® Патрицы



Белая: жесткая: 7фунтов = около **3000 g**

Розовая: мягкая: 4фунта= около **1800 g**

Голубая: экстра мягкая: 1.5фунта = около **650 g**



Зеленая: при непараллельности имплантатов до 40°. (20 ° на имплантат) Ретенция = около 2700g в зависимости от угла



Черная: Для установки базы

LOCATOR® Abutment


Слепочный колпачок

- Переносит позицию абатмента на модель
- Подходит для всех абатментов Locator
- Принцип «закрытой ложки»
- Черная силиконовая матрица
- Защелкивается на абатменте




LOCATOR® Абатмент

Лабораторный аналог

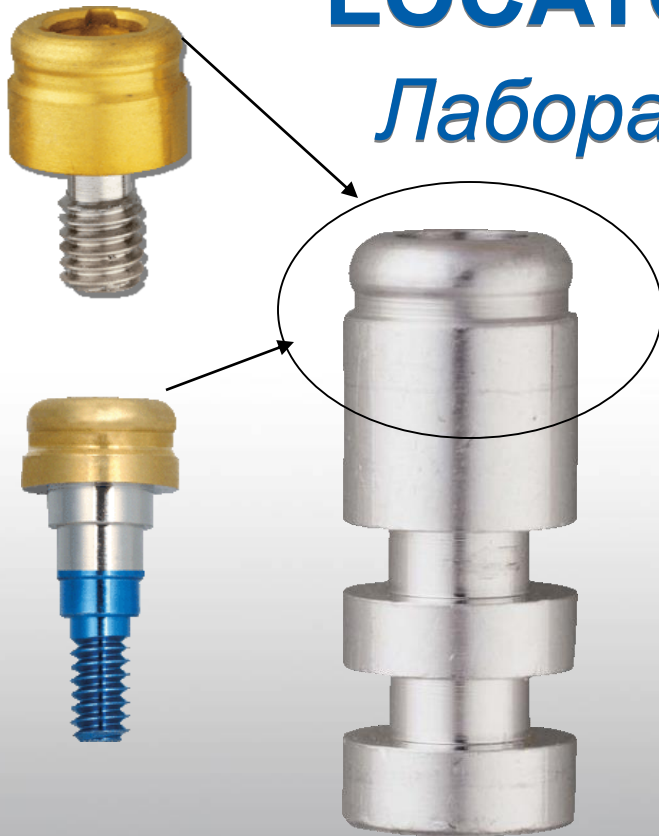

Самонаводящийся дизайн – двойная ретенция

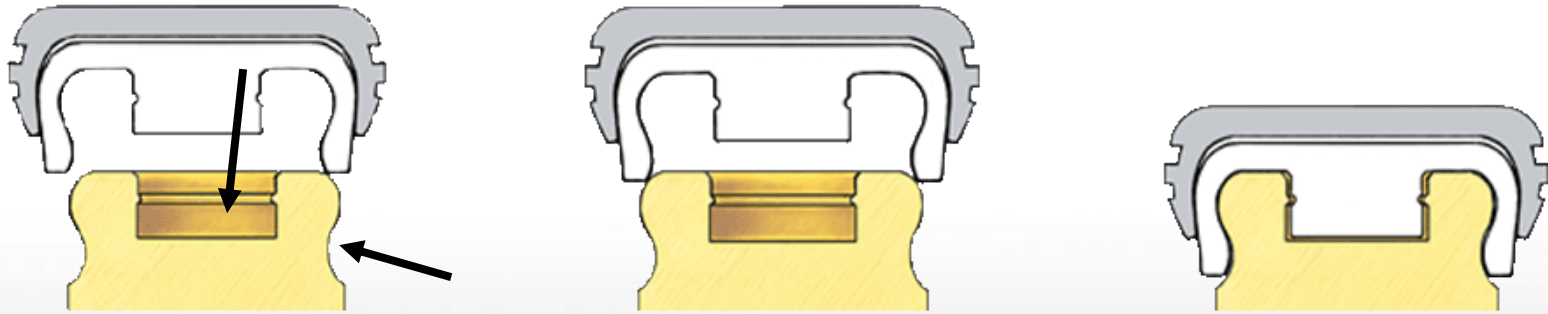

- Прост в использовании для пациентов
- Протез просто не может быть установлен неправильно